





一．把 RS232 光盘放入光驱，然后点击我的电脑。如图 1.

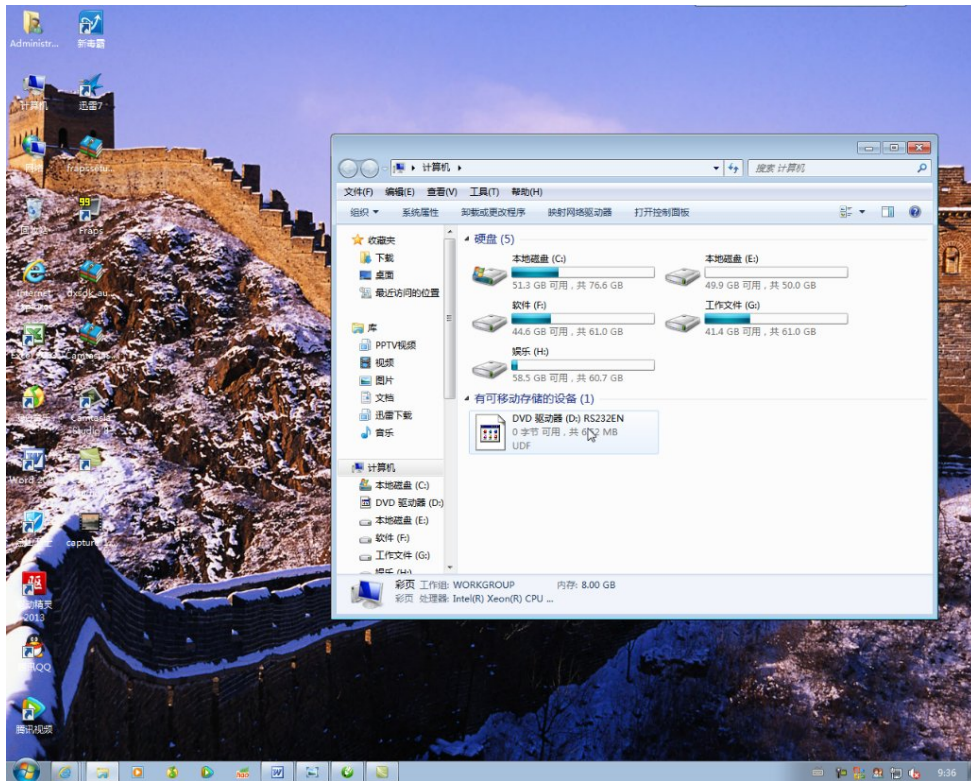


二．点击右键，打开光盘。如图 2

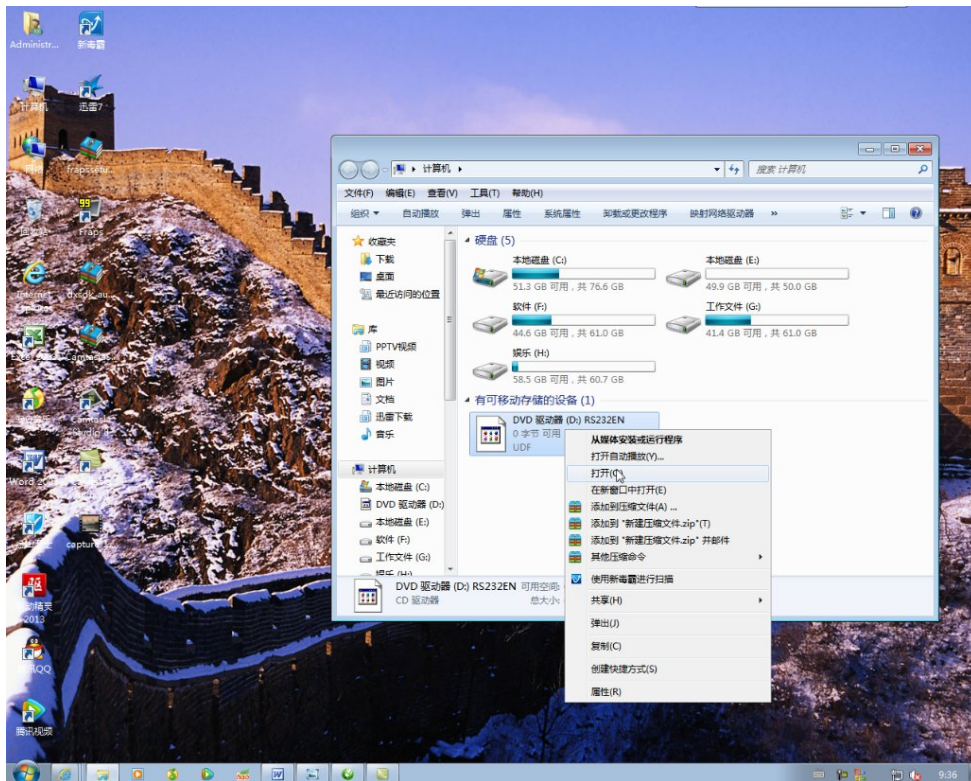


三. 选择 RS232EN, 点击 RS232.EXE, 安装 S232 软件。如图 3.图 4.

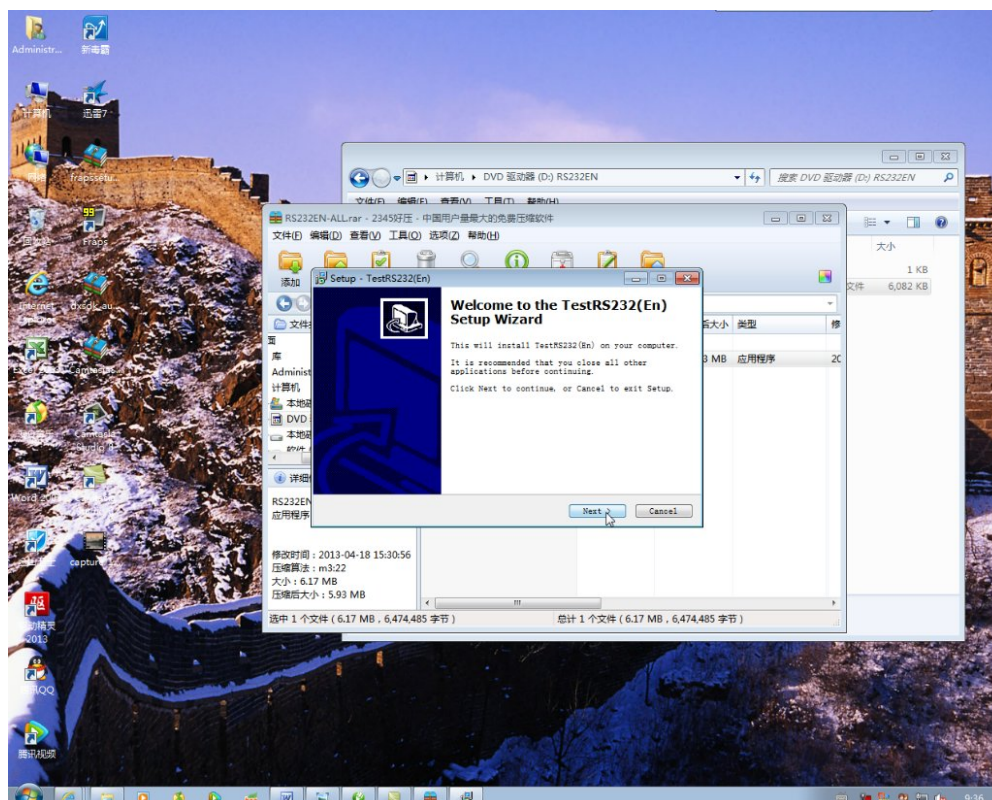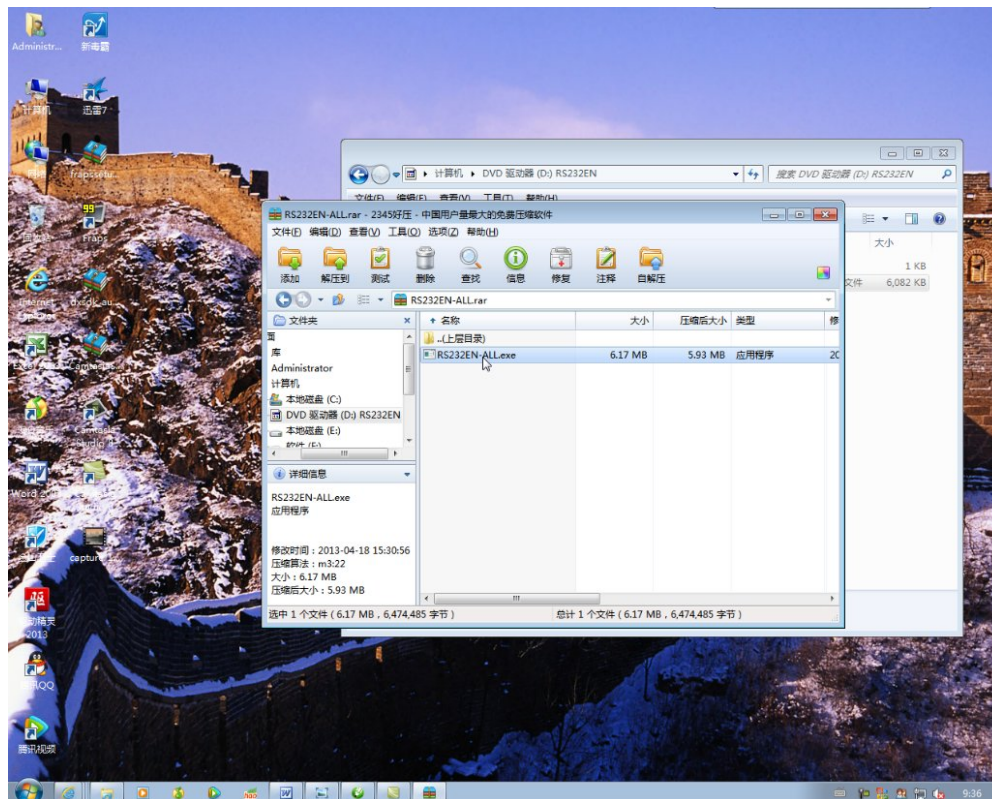


六. 安装完成后，桌面右下角会显示蓝牙标志，如图 7。

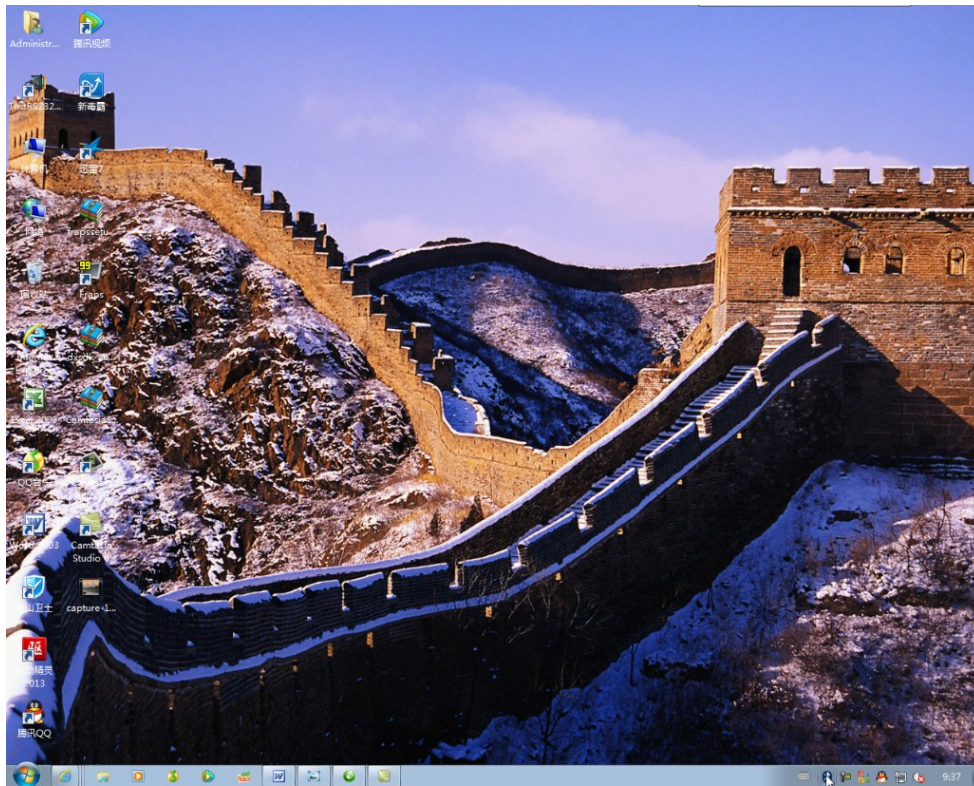


七. 双击蓝牙标志，出现图 8 界面。

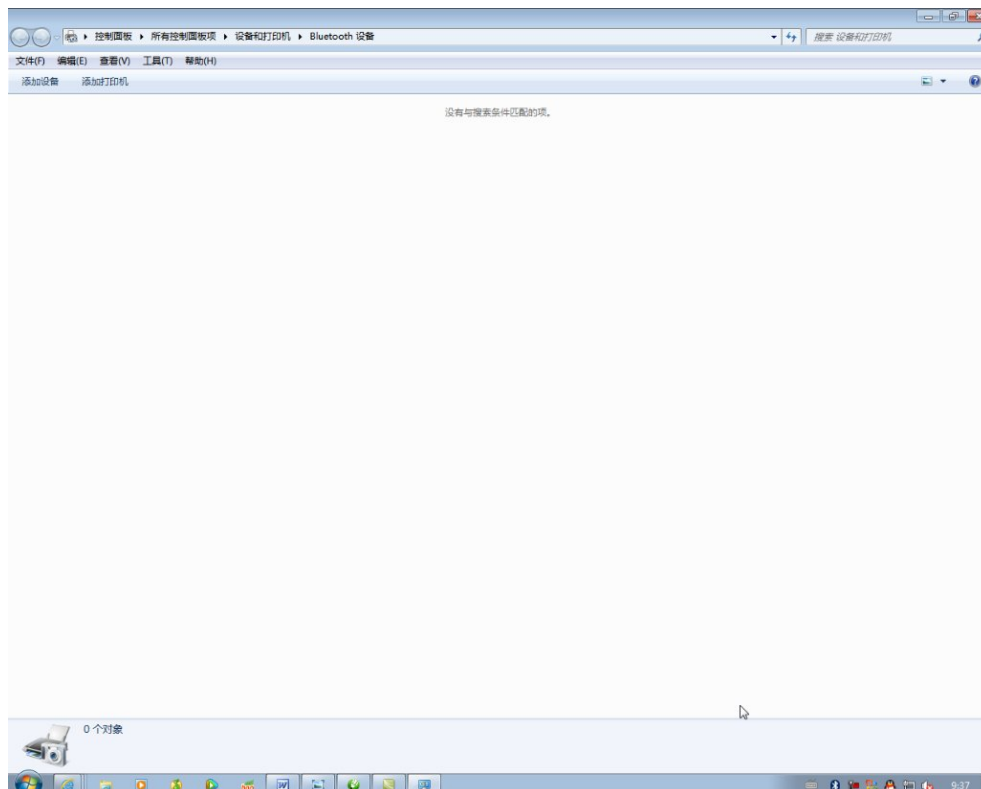


八. 仪器开机，在电脑的左上角点击添加设备，搜索到仪器如图 9。

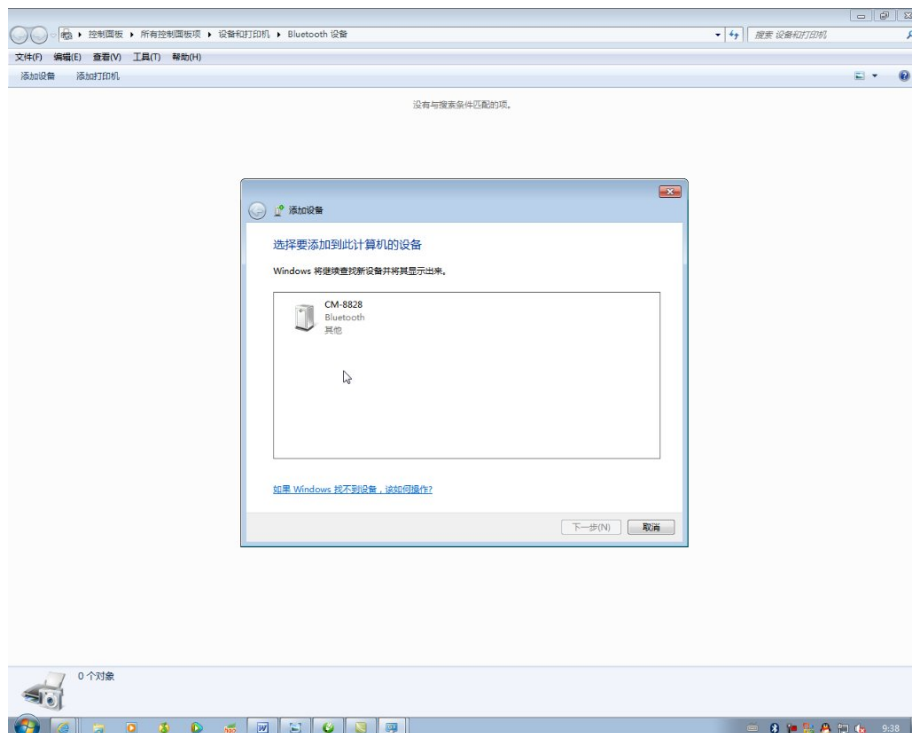


九. 选择仪器，点击下一步，出现图 10 界面。

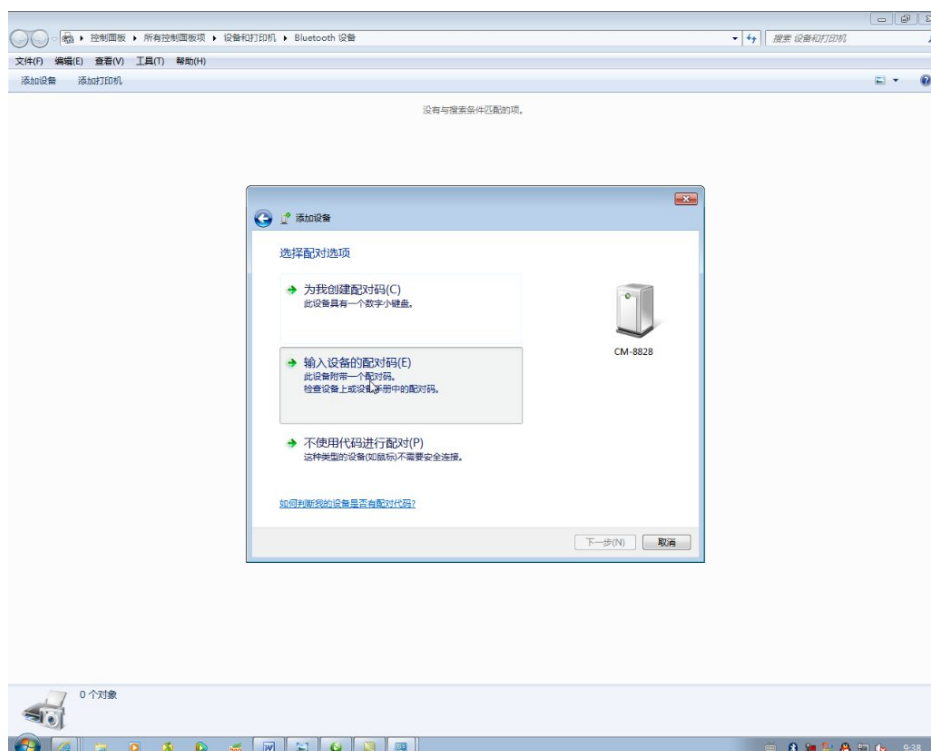


十. 选择输入配对码: 1234, 点击下一步, 直到配对完成, 关闭。图 11。

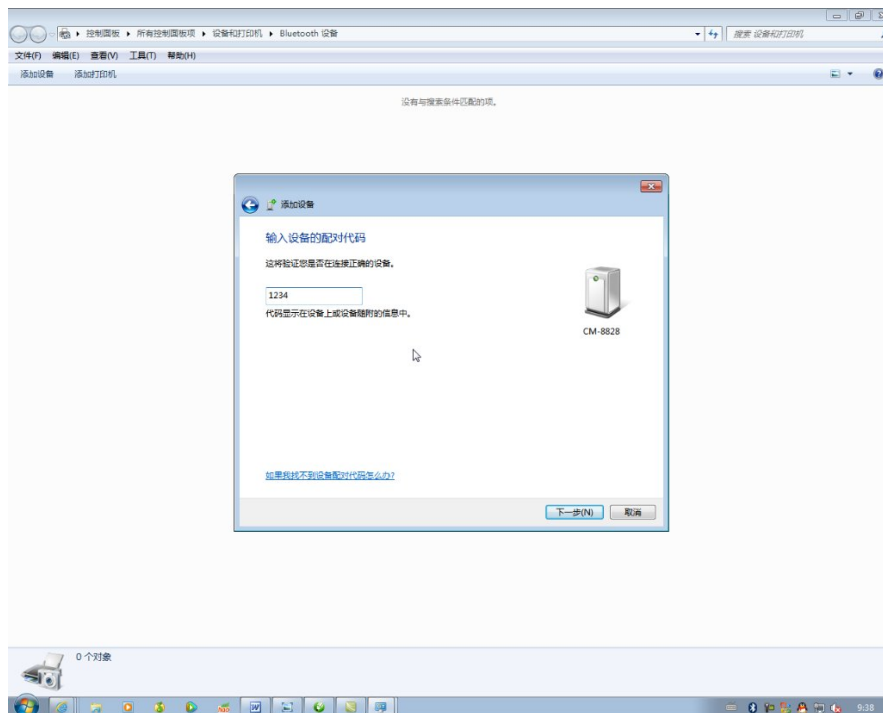


十一. 点击 RS232, 进入采集软件系统, 图 12.

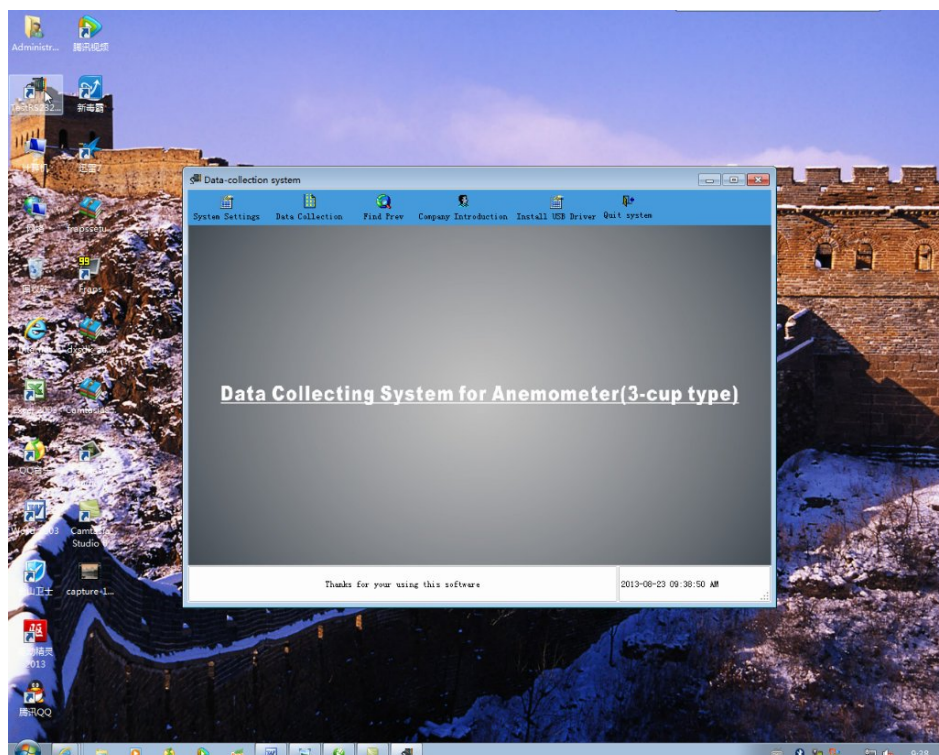

十二. 点击软件界面左上角的：Systan settings,选择 com 口和仪器类型。保存退出。
图 13。

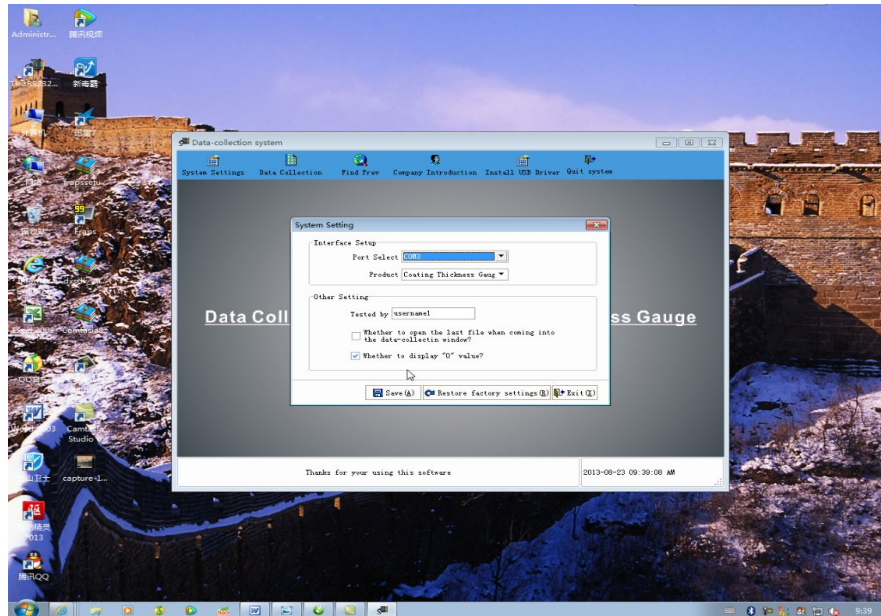

十三. 点击软件界面左上角的：Data collection, 进入采集界面, 点击开始采集或新建采集。图 14

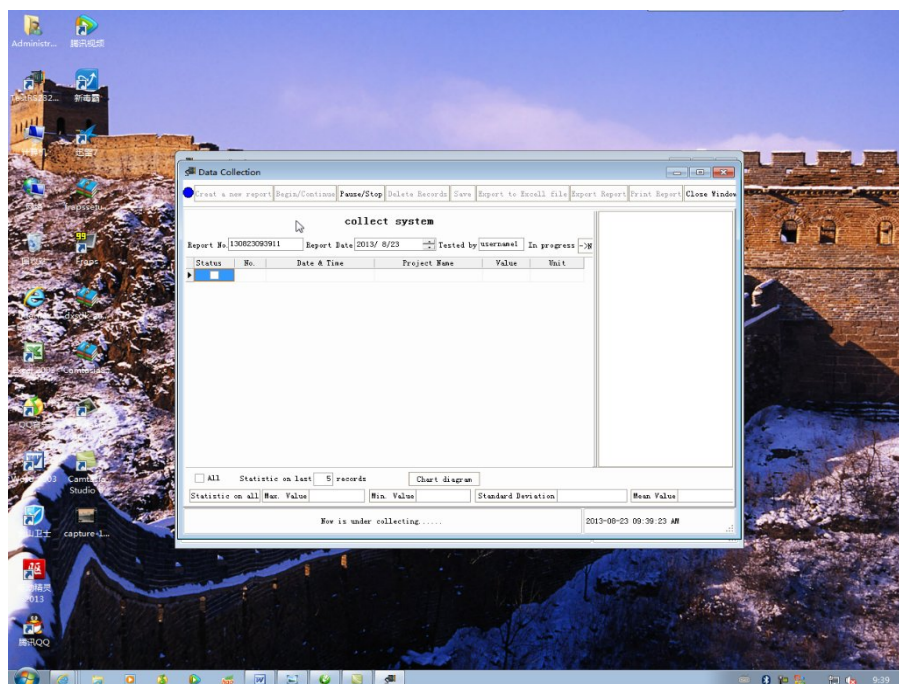

十四. 采集完成后保存导出到文件夹。图 15, 16, 完成。

